

Desi Mops™

PROFESSIONAL HYGIENE

**READY-2-USE SYSTEM ZUR
DESINFEKTION & REINIGUNG
KLINIKEN, ARZTPRAXEN, MVZ**

NORO-VIREN in 1 Minute

VIRUZID & SPORIZID

SCHNELL & NOTFALL



CLEANINGBOX™

DESINFEKTION & REINIGUNG IN DER MEDIZIN

Aktuell keine einfach & schnell einsetzbaren Produkte für große Flächen (Böden, Wände, Oberflächen)

1 Verschmutzungen Kontaminationen




- Unplanbare Spontanverschmutzungen z.B. Getränke, Essen
- Unplanbare Kontaminationen z.B. Urin, Blut, Erbrochenes, Speichel, Durchfall, Kot

2 Reinigungsmaterial Desinfektionsmittel



- Nichts für Schnell & Zwischendurch
- Gefahr der Über-/Unterdosierung
- Komplexe Hygienepläne
- Lange Einwirkzeiten
- Giftbelastung durch Gefahrstoffe & Petrochemie

3 Keimbelastungen Hygieneprobleme

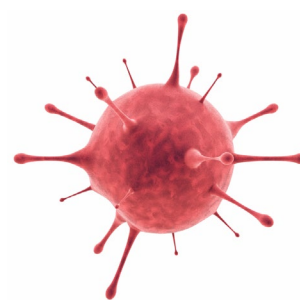

- Jährliche Infektionswellen von Noroviren, Adenoviren, Clostridien
- Gefahr von Keimverschleppungen
- Ausfall & Krankheit von Ärzten, Krankenschwestern
- Spreading-Points, wie Toiletten, Patientenzimmer, OPs, Notaufnahmen



Gesucht?
**Einfaches
Ready-2-Use
System
für die
schnelle
Desinfektion
& Reinigung**

READY-2-USE MOPPS FÜR GROSSE FLÄCHEN

ALS SCHNELL, ZWISCHENDURCH & NOTFALL-SYSTEM.





DesiMops-System

READY-2-USE MOPPS

Zur Desinfektion und Reinigung auf Peressigsäure-Basis

Sehr schnelle Wirksamkeiten

- Bakterizid
- Viruzid (z.B. Noroviren in 1 Minute)
- Sporizid inkl. C. difficile



Vorteile

- Geruchsarme PAA-Lösung
- Kein Schichtaufbau, materialschonend
- 99,8 % biologisch abbaubar, Klimaneutral
- 24 Monate stabil, Kein Gefahrstoff
- Innovatives EcoBag Nachfüllsystem
- Microfaser-Material
- Getestet nach EN 17126 & EN 16615
- VAH Zertifikat, IHO Zertifikat

Varianten und Reichweiten

S (20 Stück bis 20 m²)

M (20 Stück bis 20 m²)

L (12 Stück bis 35 m²)



DesiMops-System

VARIANTEN

Desinfektion großer Flächen (Boden, Wände, Decken)



DesiMops 20er Nachfüllpack
20 Stück, weiß

M
REICHWEITE
BIS 20 m²

DesiMops 12er Nachfüllpack
12 Stück, blau

L
REICHWEITE
BIS 35 m²

Reichweite
20 m² je Mopp

Reichweite
35 m² je Mopp

- Mopp-Größe: 42 x 13 cm
- Kompatibel mit
40 cm Kletthalter-Systemen



DesiMops
Spenderbox

DesiMops 360°
Nachfüllpack
20 Stück, blau

S
REICHWEITE
BIS 20 m²

Reichweite
20 m² je Mopp

Desinfektions-Upgrade
für Bodenwischer mit kleiner
Wischbreite & Klemmöffnung



DesiMops-System

WIRKSAMKEITEN

Bakterizid, Viruzid, Sporizid nach neuesten Normen



Wirksamkeit, hohe Belastung	Prüfmethode	Einwirkzeit, gebrauchsfertig
bakterizid	EN 13727, EN 16615	🕒 5 Min.
fungizid	EN 13624, EN 16615	🕒 15 Min.
mykobakterizid	EN 16615	🕒 15 Min.
bakterizid	EN 1276, EN 13697	🕒 5 Min.
levoruzid	EN 1650, EN 13697	🕒 15 Min.
fungizid	EN 1650, EN 13697	🕒 30 Min.
viruzid	EN 14476	🕒 30 Min.
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	🕒 5 Min.
sporizid	EN 17126	🕒 60 Min.
Staph. aureus	EN 16615*	🕒 5 Min.
C. Difficile	EN 16615*	🕒 5 Min.
Norovirus	EN 16615*	🕒 1 Min.

*klinisch relevante Mikroorganismen zusätzlich mit Originalmopp geprüft





DesiMops-System

VERTRÄGLICHKEIT

Gegenüber nahezu allen Materialien (außer Bundmetall)

Material	
Edelstahl	✓
Aluminium	✓
PP	✓
HDPE/PE	✓
PET	✓
Plexiglas	✓
PVC-Bodenbelägen	✓
Linoleum	✓
Silikon (Säurebeständig)	✓

ph-Wert
2,5

- Kein Schichtaufbau
- Keine Schlieren
- Keine Verblindung
- Keine Erosion
- Keine Verätzungen
- Kein Materialabbau

**Kompatibel zu anderen
Desinfektionsmitteln &
Reinigungsmitteln!**

**Geringe
Rückstandsbildung**

DesiMops-System

KOMPATIBILITÄT

Zu allen Mopphalter-Systemen + Wandhalterungslösung



Hybrid-Adapter-Pad

Macht jeden Standard-Mopp-Halter zum Klett-Mopp-Halter. Ermöglicht einfaches und flexibles Wechseln zwischen Einweg- und Mehrweg-Mopp-Systemen. Einfache und feste Fixierung mit Klett-schnallen.



Kompatibel mit allen Mopp-Haltern.



Clean Station



Einfach, schnell und sicher. Ergonomisches Handling.



DesiMops-System

ANWENDUNG OP

Einfach, schnell und sicher. Ergonomisches Handling.



DesiMops-System

ANWENDUNG

Einfach, schnell und sicher. Ergonomisches Handling.



WETTBEWERB

1 Routine Flächendesinfektionsmittel



Bisherige Probleme:

- Schichtaufbau bei QAV
- Virus-Lücke
- Lange Einwirkzeiten

Drei marktführende Produkte zur prophylaktischen Desinfektion auf Basis QAV, Amin oder Glucoprotamin, ausgewählte Wirksamkeiten, im Vergleich:

	Basiswirksamkeit VAH	Virus Wirksamkeit (Quelle Produktfolder)	Kein Gefahrstoff	Lösung biologisch abbaubar
Incidin Plus (Ecolab)	0,5%/1h	EN 14476, Noro, k.A. EN 14476, Adeno 2%/120 Min	✗	✗
Terralin protect (Schülke)	0,5%/1h	EN 14476, Noro, 1%/120 Min EN 14476, Adeno 2%/240 Min	✗	✗
Microbac forte (Bode/Hartmann)	0,5%/1h	EN 14476, Noro, 1%/240 Min EN 14476, Adeno 1,5%/240 Min	✗	✗
DesiMops (CleaningBox)	Ready to use	EN 14476, EN 16615 Noro, 1 Min. EN 14476, Adeno 5 Min.	✓	✓

WETTBEWERB

2 High-Level Flächendesinfektionsmittel

Marktführende Produkte zum Einsatz in Bereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko,
Basis Peroxidverbindungen, Pulver, C. difficile-Wirksamkeiten



Bisherige Probleme:

- Unangenehmer Geruch
- Schlechte Benetzung
- Schlierenbildung

	Basiswirksamkeit VAH	C. difficile (Quelle Produktfolder)	Kein Gefahrstoff
Perform (Schülke)	0,5%/1h	EN 17126, 1%/120 Min	✗
Dismozon plus (Bode/Hartmann)	0,4%/1h	k. A. Norm, 0,8%/60 Min.	✗
DesiMops (CleaningBox)	Ready-2-Use	EN 17126, EN 16615, 5 Min.	✓



ReadyMops-System

READY-2-USE MOPPS

Zur Reinigung & Pflege

Sehr gute Reinigungseigenschaften

- Hohe Reinigungsleistung durch Microfaser Material
- Biologisch-abbaubare Allzweck-Tränkung
- Streifenfreie Abtrocknung
- Sehr rückstandsarm, kein Kleben



Vorteile

- Frische Duft
- Materialschonend
- Klimaneutral, Kein Gefahrstoff
- 24 Monate Haltbarkeit
- Innovatives EcoBag Nachfüllsystem



Varianten und Reichweiten

S (20 Stück bis 20 m²)

M (20 Stück bis 20 m²)

L (12 Stück bis 35 m²)



ReadyMops-System

NASSREINIGUNG



Reinigung großer Flächen (Boden, Wände, Decken)



Aufsaug-Mopps

ABSORPTION

Flüssigkeiten, wie Urin, Blut, Wasser, Getränke

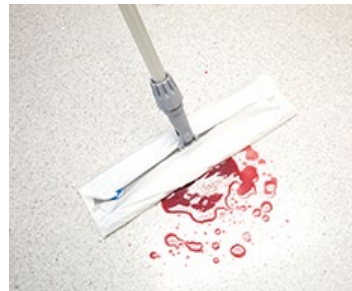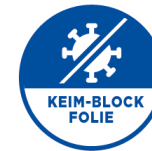

Blut



Urin



Getränke

TROCKENREINIGUNG

**Haare**

Clean Station



Platzsparendes Wandhalterungssystem **CLEANSTATION** Modulare Erweiterungsmöglichkeiten

**Clean
Station**



Flaschen-Halter



Mundschutz-Halter



Tuch-Haken



Handschuh-Halter



READY-2-USE TÜCHER FÜR OBERFLÄCHEN

ALS SCHNELL, ZWISCHENDURCH & NOTFALL-SYSTEM.



Ready Wipes



Getränkt mit biologisch abbaubaren Reinigungsemulsionen



Sehr gute Reinigungseigenschaften



kompostierbare Viskose Fasern



Reichhaltige Tränkung für hohe Reichweite



Große Tuchgröße 30 x 30 cm



Elastisch Reißfest Fusselarm



Getränkt mit biologisch abbaubaren Reinigungsemulsionen



Sehr gute Reinigungseigenschaften



7-Komponenten Microfaser/Viskose Mischgewebe



Reichhaltige Tränkung für hohe Reichweite



Sehr große Tuchgröße 40 x 30 cm



Elastisch Reißfest Fusselarm

KUNDENNUTZEN



Zeit-/Kosteneinsparung

- Sofort einsetzbar ohne Rüstzeiten
- Kein Wasch- und Logistikaufwand



Einfachheit

- Vordosiert & intuitiv anwendbar
- Minimaler Schulungsaufwand



Prozesssicherheit

- Kein Risiko der Fehldosierung
- Kein Risiko der Keimverschleppung
- Bessere Hygiene Compliance



Effizienz

- Reinigung & Desinfektion in einem Schritt
- Hohe Flächenleistungen
- Schnellere Wiedernutzung von Patienten- oder Behandlungszimmern, OPs



Nachhaltigkeit

- Klimaneutrale Produkte
- Biologisch abbaubare Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Keine Gefahrstoffe



Flexibilität

- Routine oder Zwischendurch
- Mobil oder Stationär
- Kompatibel zu Mopphaltern & Reinigungswagen

Desi MopsTM

PROFESSIONAL HYGIENE



Gern beraten wir Sie!

CleaningBox GmbH
Moritzstraße 28
99084 Erfurt

Kontakt:

Telefon: +49 361 – 349 478 39

Fax: +49 361 – 349 478 40

E-Mail: info@cleaningbox.de

Web: www.cleaningbox.de

Bestellen im Webshop:

<https://cleaningbox.de/shop/>



CLEANINGBOXTM